

DEA no Campus Anglo

Onde está, quando usar e como agir diante de uma parada cardiorrespiratória.


Prédio principal



Entrada principal



**DEA · Portaria das
Chaves**

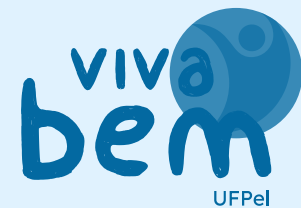


Coordenação de Saúde
e Qualidade de Vida



UFPEL

Memorize este local

Em uma emergência, a rota é curta e conhecida:

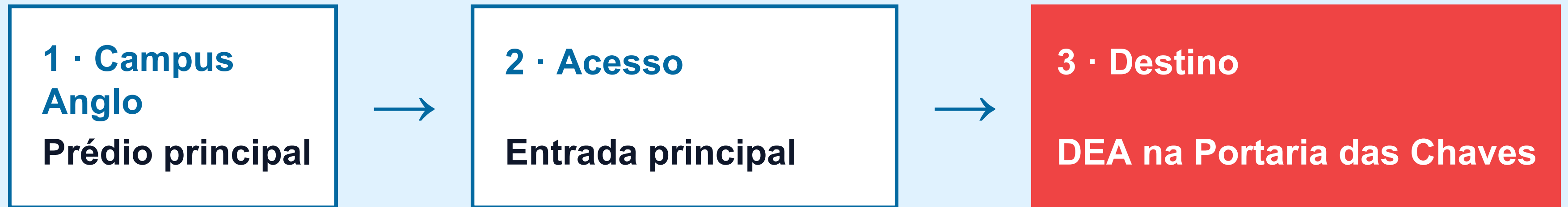

Peça para alguém buscar o DEA enquanto você permanece com a vítima e inicia a Reanimação Cardiopulmonar - RCP.

Não deixe a vítima sozinha.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Memorize este local

Em uma emergência, a rota é curta e conhecida:

3 - Destino

DEA na Portaria das Chaves



Peça para alguém buscar o DEA enquanto você permanece com a vítima e inicia a Reanimação Cardiopulmonar - RCP.
Não deixe a vítima sozinha.

POR QUE O LOCAL IMPORTA?

Tempo é vida

A resposta rápida combina reconhecimento, RCP e desfibrilação precoce. Em local de grande circulação, mais pessoas podem testemunhar a emergência e dividir as tarefas.

2–3×

A RCP imediata pode duplicar ou triplicar as chances de sobrevivência.

Dado de comunicação da American Heart Association [4].

2,0×

Sobrevida até a alta hospitalar no grupo com voluntários treinados em RCP + DEA.

30 sobreviventes em 128 paradas versus 15 em 107 com treinamento apenas em RCP; ensaio multicêntrico [3].

Importante: os resultados dependem de resposta organizada, treinamento, RCP e tempo até o choque; não são uma promessa individual.

Quem pode utilizar o DEA?

O Leigo Treinado

O DEA foi projetado para ser operado por **qualquer pessoa que tenha recebido treinamento básico**. Ele é o elo vital que conecta a vítima ao suporte avançado [3] [5].

A pessoa deve reconhecer a emergência, pedir ajuda e seguir rigorosamente as instruções do aparelho.

Referências: AHA 2025 [1], Hallstrom et al. [3], Hazinski et al. [5].

Inteligência do Aparelho

Você não precisa diagnosticar o ritmo cardíaco. O DEA analisa a atividade elétrica do coração automaticamente e decide se o choque é necessário [1].

SEGURANÇA TOTAL

O aparelho só autoriza o choque se houver indicação clínica. Siga os comandos de VOZ.

Quando utilizar o DEA?

1 - NÃO RESPONDE

Toque nos ombros e chame em voz alta. Se a pessoa não reagir a estímulos físicos ou verbais.

2 - NÃO RESPIRA

Observe o tórax. Se não houver movimento respiratório ou se a respiração for anormal (apenas suspiros).

Atenção: Suspiros agônicos (gasping) não são respiração normal. Trate como parada cardíaca.

Ação Imediata: Chame ajuda e peça o DEA!

Indique a Portaria das Chaves como local de retirada.

Os primeiros passos

1

SEGURANÇA DA CENA

Verifique riscos
para você, a vítima e
os demais
presentes.

2

AVALIE A RESPOSTA

Toque nos ombros
e chame em voz
alta. Se não
responder...

3

CHAME AJUDA

Acione o serviço de
emergência local
imediatamente.

4

PEÇA O DEA

Indique a Portaria
das Chaves (Prédio
Principal).

5

INICIE A RCP

Se não respira
normalmente, inicie
as compressões.

A rapidez no acionamento do **DEA** é o fator determinante para a sobrevivência da vítima.

RCP enquanto o DEA não chega

COMO REALIZAR

- 1 Vítima de costas em superfície firme.
- 2 Mãos no centro do tórax (metade inferior do esterno).
- 3 Comprima forte e rápido (5 a 6 cm de profundidade).
- 4 Frequência de 100 a 120 compressões por minuto.

PONTOS CRÍTICOS

Permita o retorno total do tórax após cada compressão.

Minimize interrupções nas compressões.

Se houver outra pessoa, revezem a cada 2 minutos para evitar cansaço.

Mantenha os braços esticados e use o peso do corpo.

NÃO PARE as compressões até que o DEA chegue e esteja pronto para análise ou a vítima apresente sinais de vida.

DEA chegou: ligue e siga a voz

1 **LIGUE O DEA**

Abra a tampa ou pressione o botão "ON".
O aparelho começará a falar imediatamente.

2 **PREPARE O TÓRAX**

Exponha o peito da vítima. Seque a pele se estiver molhada e remova pelos excessivos se necessário.

3 **CONECTE AS PÁS**

Retire a proteção dos adesivos e cole-os firmemente na pele conforme o desenho nas pás.

4 **AGUARDE A ANÁLISE**

Conecte o cabo no aparelho (se necessário). O DEA dirá: "Analisando ritmo cardíaco. Não toque no paciente".

**OUÇA COM ATENÇÃO: O DEA dará instruções passo a passo.
Mantenha a calma e siga cada comando.**

POSICIONAMENTO CRÍTICO

Onde aplicar as pás

LADO DIREITO

Tórax Superior Direito

Aplique a pá logo abaixo da clavícula, sobre o músculo peitoral direito.

LADO ESQUERDO

Tórax Lateral Esquerdo

Aplique a pá abaixo da linha do mamilo esquerdo, na lateral do tórax.

IMPORTANTE: As pás devem ser aplicadas diretamente sobre a pele nua e seca. Remova adesivos medicamentosos e evite colocar as pás sobre dispositivos médicos implantados (como marca-passos).

Siga sempre as ilustrações contidas no próprio adesivo das pás do DEA.

POSICIONAMENTO CRÍTICO

Onde aplicar as pás

IMPORTANTE: As pás devem ser aplicadas diretamente sobre a pele nua e seca.

Remova adesivos medicamentosos e evite colocar as pás sobre dispositivos médicos implantados (como marca-passos).



Siga sempre as ilustrações contidas no próprio adesivo das pás do DEA.

Afaste-se: o DEA decide

1

ANÁLISE DO RITMO

Ninguém deve tocar na vítima. O DEA dirá: "Analisando ritmo cardíaco. Não toque no paciente". O movimento pode interferir na leitura.

2

CHOQUE INDICADO?

SIM: O aparelho carregará e pedirá para apertar o botão de choque.

NÃO: O aparelho dirá "Choque não indicado".

3

RETOMADA DA RCP

Imediatamente após o choque (ou se não for indicado), reinicie as compressões torácicas. Não perca tempo avaliando a vítima manualmente.

O DEA só aplica choque se o ritmo for compatível. No entanto, o ritmo não chocável, não exclui a parada cardíaca. Confie no equipamento e siga os comandos de voz.

Evite atrasos e riscos

NÃO ABANDONE A VÍTIMA

Nunca saia de perto da vítima para buscar o DEA sozinho. Delegue a tarefa a alguém específico enquanto você inicia a RCP.

NÃO TOQUE NO PACIENTE

Durante a análise do ritmo e a aplicação do choque, ninguém deve tocar na vítima. Isso evita interferências e choques acidentais.

NÃO DESLIGUE O DEA

Uma vez ligado, mantenha o aparelho funcionando até a chegada do socorro profissional, mesmo que a vítima pareça ter melhorado.

NÃO RETIRE AS PÁS

Não remova os adesivos do tórax da vítima. O DEA continuará monitorando o ritmo cardíaco a cada 2 minutos automaticamente.

Lembre-se: O tempo é o fator mais crítico. Evite hesitações e siga rigorosamente os comandos de voz do aparelho.

Reconheça. Chame. Comprima. Desfibrile.

LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS ANGLO

O DEA está localizado na **Portaria das Chaves**,
na entrada do prédio principal.

FONTES E REFERÊNCIAS

- [1] AHA. Part 7: Adult Basic Life Support — 2025 Guidelines for CPR and ECC.
- [2] ERC. Chain of Survival — Guidelines 2025.
- [3] Hallstrom AP et al. Public-access defibrillation and survival. N Engl J Med. 2004.
- [4] AHA. CPR Facts & Stats. 2024.
- [5] Hazinski MF et al. Lay rescuer automated external defibrillator programs. Circulation. 2005.

Este material é estritamente educativo e não substitui o treinamento prático certificado em Suporte Básico de Vida. Em caso de emergência, acione imediatamente o serviço de emergência local.

Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida - CSQV

Seção de Prevenção e Promoção à Saúde - SPPS

Contatos:



(53) 32843981



csqv@ufpel.edu.br



provida@ufpel.edu.br

Escaneie o QrCode e
conheça mais ações de
saúde e qualidade de vida.



Acesse também vídeos e
materiais informativos
sobre primeiros socorros.



Coordenação de Saúde
e Qualidade de Vida



UFPEL